FICHA TÉCNICA
QUATERSOFT 5G MULTIENZIMÁTICO

REGISTRO SANITARIO. 2021DM-0024414

PRODUCTO A BASE DE AMONIOS CUATERNARIOS DE QUINTA GENERACIÓN, INDICADO COMO AGENTE DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

COMPOSICION: Amonios cuaternarios de 5 generación al 0,4 %, enzimas: proteasa, lipasa amilasa y celulasa, agente secuestrante de la corrosión, tensoactivos, excipientes y disolvente.



CARACTERISTICAS:

✓ **Es un producto que usa la sinergia de cuatro enzimas (proteasa, lipasa amilasa y celulasa) que cumplen la función de limpieza, remoción y degradación de desechos celulares, tejidos, grasa, sangre, proteínas, mucosa, saliva, heces y cualquier tipo de carga orgánica fuerte.**

✓ **Producto biodegradable con acción anticorrosión.**

✓ **Su actividad se presenta a los 5 minutos de ser aplicado y su efecto residual es de 4 horas**

✓ **Tipo de dispositivo: IIa No invasivo**

ASPECTO FÍSICO: Liquido translúcido azul

PRESENTACIONES: 1.000 Ml y 3.800 mL

VIDA UTIL: ✓ 36 meses, conservándose tapado, en lugar fresco, seco y alejado de la luz solar.

MECANISMO DE ACCIÓN:

✓ Los amonios cuaternarios actúan, penetrando y rompiendo la membrana citroplasmática, degradando las proteínas y ácidos nucleicos y, finalmente, provocando la lisis celular. Esto le confiere excelentes propiedades frente a todo tipo de microorganismos.


1 Łuczyński, J., Frąckowiak, R., Włoch, A., Kleszczyńska, H., & Witek, S. (2013). Gemini ester quat surfactants and their biological
activity. Cellular and Molecular Biology Letters, 18(1), 89-101.

OTROS USOS:

✓ Se aplica en la desinfección de dispositivos médicos y equipos biomédicos, con el fin de prevenir y evitar la propagación y desarrollo de procesos infecciosos.

✓ Para uso en el sector médico- hospitalario y afines.

INSTRUCCIONES DE USO

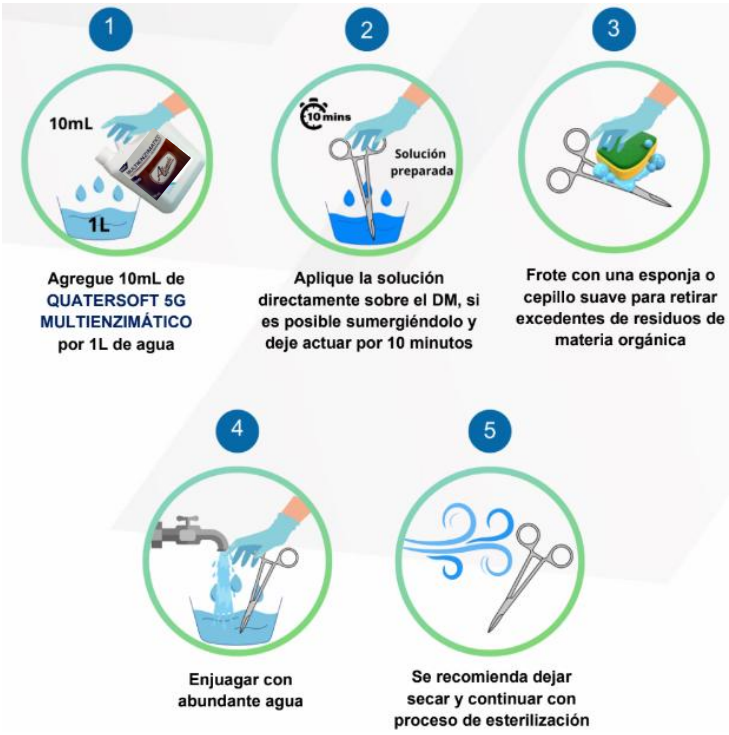

PRECAUCIONES DE USO:

✓ Evite el contacto con los ojos, en tal caso enjuague con abundante agua.

✓ En caso de reacción adversa en contacto con piel, lavar con abundante agua. Si la reacción persiste, consulte a su médico.

✓ Manténgase fuera del alcance de los niños.

ALMACENAMIENTO:

✓ Manténgase en un lugar fresco, seco y protegido de la luz solar.

✓ Mantenga el envase cerrado para evitar derrames.

✓ Almacenar a temperatura ambiente en su envase original.

icontec ISO 9001 SC-2002157 icontec ISO 13485 DM-2002156 icontec ISO 14001 SA-2002174

ALFA MEDICAL